



LatinHealth
Group

Haemoband Plus



Tecnología de recarga automática
de un solo uso

 **Haemoband**
SURGICAL

Ligador Multibanda para Hemorroides



El diseño innovador incluye:

Bandas moldeadas verdes

Han sido desarrolladas a partir de nuestro exclusivo material compuesto, diseñado específicamente para garantizar un rendimiento constante y una vida útil prolongada. Las bandas moldeadas individualmente se deslizan más fácilmente, lo que elimina la torsión y garantiza una liberación más confiable y un ajuste seguro en el tejido.

Precargado con 4 bandas

El dispositivo está limpio y listo para usar inmediatamente desde el embalaje, sin necesidad de cargar ninguna banda nueva. El dispositivo recarga automáticamente 3 bandas adicionales para ligar hasta tres hemorroides, con la cuarta banda de repuesto.

Boquilla de succión transparente

La claridad de la punta transparente maximiza la visibilidad durante todo el procedimiento, colocado en la punta de una delgada sonda de inserción de 120mm.

Mango multiacción

El innovador mango controla la succión, dispara y recarga las bandas. Una nueva línea escalonada guía al usuario a través de cada etapa de la aplicación.

Beneficios

1

Clínicamente eficiente

Haemoband-PLUS es clínicamente muy eficaz. Su mango multiacción significa que solo necesita una mano para controlar las bandas de succión, liberación y recarga. Esto deja la otra mano libre para sostener un proctoscopio y permite al usuario trabajar solo. El diseño de Haemoband-PLUS también permite aplicaciones mucho más precisas, lo que reduce la necesidad de procedimientos adicionales.

2

Más fácil y rápido

La pistola está precargada, ya limpia y puede usarse con una sola mano. El tiempo necesario para un procedimiento de ligadura típico se reduce de 20 minutos a entre 2 y 4 minutos para vendar hasta 3 hemorroides. Esto no sólo mejora considerablemente la comodidad del paciente, sino que al ser desechable elimina el riesgo de contaminación cruzada.

3

Listo para usar

La pistola Haemoband-PLUS está lista para usar directamente desde la bolsa limpia y hermética. No hay piezas adicionales y el único equipo adicional que necesita es un proctoscopio y un sistema de succión hospitalaria estándar.

4

Económico

El Haemoband-PLUS es uno de los ligadores múltiples más rentables disponibles. Es un dispositivo de un solo uso y, por lo tanto, elimina los costos adicionales asociados con los dispositivos de uso múltiple.

Tratamiento estándar de oro



Existe una amplia gama de opciones disponibles en el tratamiento de las hemorroides; dependiendo de la gravedad de la afección, estos varían desde simples consejos dietéticos hasta una intervención quirúrgica agresiva. Obviamente, los pacientes prefieren los procedimientos ambulatorios mínimamente invasivos. La ligadura con banda elástica mediante el dispositivo Haemoband-PLUS es muy apreciada tanto por los pacientes como por los médicos como un tratamiento eficaz y seguro para las hemorroides sintomáticas de primer a tercer grado.

El procedimiento se puede realizar de forma ambulatoria y ha demostrado ser sencillo, fácil y económico.

Cómo utilizar




Paso 1:

Conecte la succión usando el aplicador universal en la parte inferior del mango.



Paso 2:

Presione el gatillo hasta la primera línea marcada para inducir la succión; esto atraerá el tejido deseado hacia la boquilla.

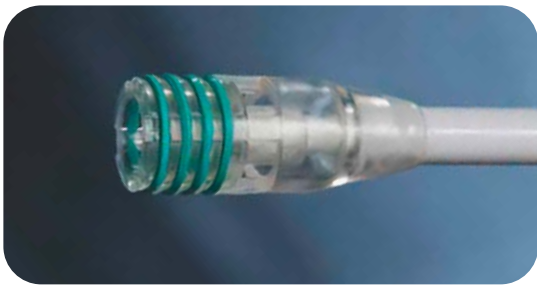

Paso 3:

Cuando el tejido esté asegurado, presione el gatillo hasta su posición final; esto liberará la banda sobre la hemorroide objetivo.



Paso 4:

¡Liberar! Cuando el gatillo se suelte por completo, se recargará automáticamente una nueva banda y estará lista para la siguiente aplicación de banda.

